


DUODOPA®-ANNOKSEN MUUTTAMINEN


A. JATKUVAN INFUUSION MUUTTAMINEN

1. Laitteen pitää olla **PYSÄHTYNYT**-tilassa.
2. Paina **SEURAAVA**-painiketta 2 kertaa.
Näytössä lukee "Jatkuva infuusio X ml/h".
3. Muuta annosta nuolipainikkeilla.
4. Vahvista annoksen muutos painamalla **ENTER/CLEAR**-painiketta.
5. Käynnistä jatkuva infuusio uudelleen painamalla **STOP/START**-painiketta 3 sekuntia.

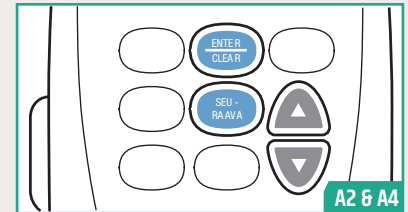



B. LISÄANNOKSEN MUUTTAMINEN

1. Laitteen pitää olla **PYSÄHTYNYT**-tilassa.
2. Paina **SEURAAVA**-painiketta 3 kertaa.
Näytössä lukee "Lisäannos X ml".
3. Muuta annosta nuolipainikkeilla.
4. Vahvista annoksen muutos painamalla **ENTER/CLEAR**-painiketta.
5. Käynnistä jatkuva infuusio uudelleen painamalla **STOP/START**-painiketta 3 sekuntia.

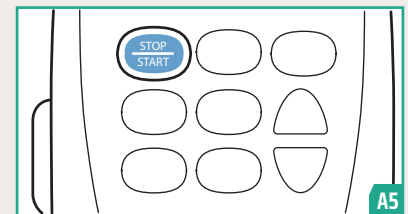

C. AAMUANNOKSEN MUUTTAMINEN

1. Laitteen pitää olla **KÄYNNISSÄ**.
2. Paina **AAMUANNOS**-painiketta kerran.
Aiemmin asetettu aamuannos näkyy näytöllä.
3. Muuta annosta nuolipainikkeilla.
4. Vahvista annoksen muutos painamalla **ENTER/CLEAR**-painiketta.
5. Paina **AAMUANNOS**-painiketta uudelleen.
Laite antaa asetetun aamuannoksen, jonka jälkeen se siirtyy automaattisesti annostelemaan jatkuvaa infuusiota (**KÄYNNISSÄ**).

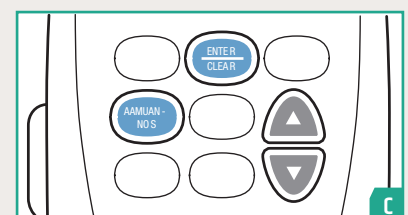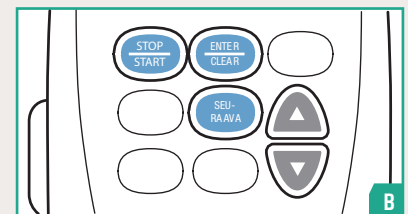

AbbVie Oy

Pihatörmä 1B, 02240 Espoo
FIDUO140621(1)/10.2016

Copyright © 2014 AbbVie. Kaikki oikeudet pidätetään.